

endovision

Arthross Pro Probe

3Way

- ☑ 전극팁이 분리되지 않는 구조
- ☑ 안정적인 플라즈마 형성
- ☑ 석션홀 적용으로 막힘 현상 최소화
- ☑ 3Way Stopcock으로 수술 시간 단축




제품명	Arthross Pro Probe
품목명	일회용발조절식전기수술기용전극
허가번호	제인 15-1403 호
사용목적	전기수술기 및 의료용 전기소작기 등 전기수술장치에 연결하여 인체조직의 절개 또는 응고에 사용


(주)엔도비전

본 사 | (41061) 대구광역시 동구 동내로 66-26 / Tel. 053-751-1955 / Fax. 053-751-1964
 서울지사 | (06212) 서울특별시 강남구 테헤란로52길 17, 12층 / Tel. 02-2135-7738 / Fax. 02-2135-7739
 E-mail. seoul-order@endovision.co.kr www.endovision.co.kr

수술 시간 단축과 사용자 피로도를 생각한 최적의 설계 **Arthross Pro Probe - 3Way**

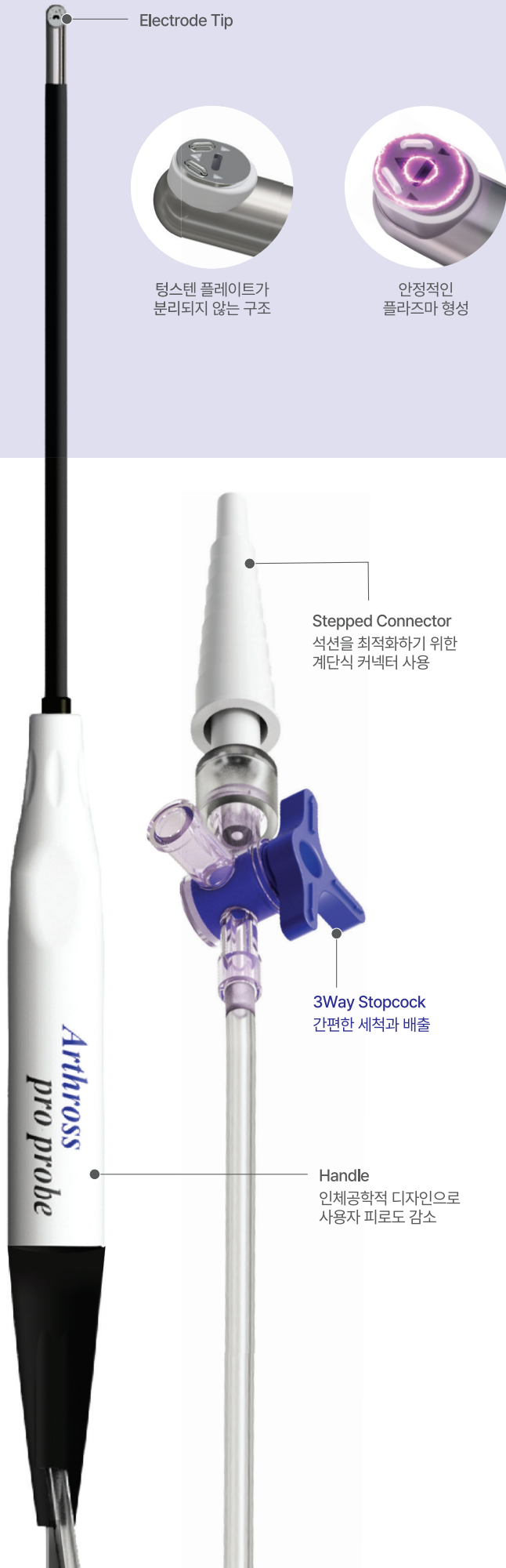

Electrode Tip

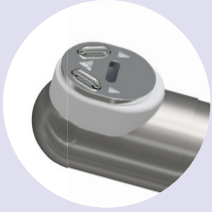

텅스텐 플레이트가 분리되지 않는 구조



안정적인 플라즈마 형성

Stepped Connector
석션을 최적화하기 위한
계단식 커넥터 사용

3Way Stopcock
간편한 세척과 배출

Handle
인체공학적 디자인으로
사용자 피로도 감소

전극팁이 분리되지 않는 구조

사용 도중 팁이 분리되는 타사제품과 비교하여 Bended Tungsten wire로 고정되어 분리 문제 방지

안정적인 플라즈마 형성

텅스텐 플레이트에 Triangular design(삼각형 디자인)을 추가하여 팁 전체적으로 플라즈마가 발현되도록 설계

막힘 현상 최소화

석션을 적용으로 흡입된 조직에 의한 막힘 현상 최소화

수술 시간 단축

간편한 배출이 가능한 3Way Stopcock으로 수술 시간 단축

endovision 전용

Image	Type	Model Name	Length	Diameter
	90°	APP200C-3W	Ø 4.3	135
		APP210C-3W		220
	75°	APP201C-3W	Ø 4.3	135
	Curved	APP300C-3W	Ø 4.1	
	Bevel	APP400C-3W	Ø 3.6	
	Hook	APP500C-3W	Ø 3.2	
	Ball	APP600C-3W	Ø 2.8	

SMITH & NEPHEW 호환

Image	Type	Model Name	Length	Diameter
	90°	APP200A-3W	Ø 4.3	135
		APP210A-3W		220
	75°	APP201A-3W	Ø 4.3	135
	Curved	APP300A-3W	Ø 4.1	
	Bevel	APP400A-3W	Ø 3.6	
	Hook	APP500A-3W	Ø 3.2	
	Ball	APP600A-3W	Ø 2.8	